

Verkorte handleiding

Coderen niet nodig

Bloedmonster – 0,5 µL

Testtijd – 6 seconden*

Geheugen – 1865 tests

BELANGRIJK: Zie de BGStar®-gebruikershandleiding voor een gedetailleerde beschrijving van het uitvoeren van de test.

Met het BGStar®-bloedglucosemeetsysteem kunt u uw bloedglucose meten in uw vingertoppen, de handpalmen (onderaan de duim) of onderarmen (zie de gebruikershandleiding voor de exacte locaties).

Het BGStar®-bloedglucosemeetsysteem




Bloedglucose-meter

- 1) Scherm
- 2) CHECK-knop
- 3) Achtergrondverlichtingsknop
- 4) Pijltje OMLAAG-knop
- 5) Pijltje OMHOOG-knop
- 6) Strippoort



Teststrip

- 1) Contactstrepen
- 2) Vulvenster
- 3) Monstergebied

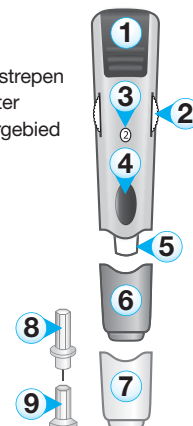

Prikpen

- 1) Spangreep
- 2) Knop voor aanpassen van de diepte
- 3) Venster voor diepte-indicatie
- 4) Vrijgaveknop
- 5) Lancethouder
- 6) Dop van de prikpen
- 7) Testdop voor alternatieve locaties
- 8) Lancet
- 9) Lancet beschermdop

*Gemiddelde testtijd

Eenvoudige stappen voor het testen van uw bloedglucosewaarde

(Zie de BGStar®-gebruikershandleiding voor een gedetailleerde beschrijving.)

1 Plaats een nieuwe teststrip in de meter:

Plaats een teststrip met de contactstrepen omhoog in de strippoort van de meter. De meter schakelt automatisch aan.

VOORZICHTIG: Voor een nauwkeurig resultaat moet u voor elke test eerst uw handen wassen met warm water en zeep en ze goed afdrogen.



2 Prik op de testlocatie:

Volg de stappen voor het voorbereiden van de prikpen (zie de instructies aan de rechterzijde).


Druk de prikpen op de plek waar u wilt prikken. Druk op de vrijgaveknop.



3 Pers bloeddruppel uit:


Veeg met een zuiver doekje of papieren zakdoekje de eerste bloeddruppel die verschijnt weg.

Druk vanaf de basis van uw vinger omhoog richting de top tot een tweede druppeltje verschijnt.

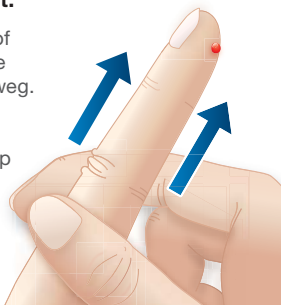


4 Breng de teststrip naar de bloeddruppel:

De teststrip trekt het bloed in de teststrip via het monstergebied.

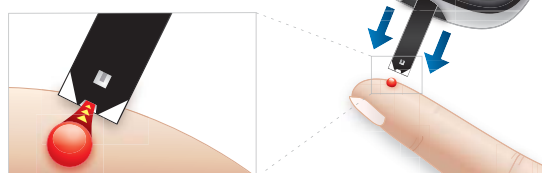

5 Verwijder de teststrip van de bloeddruppel als u de pieptoon hoort:

De meter piept eenmaal om aan te geven dat u de punt van de teststrip van de bloeddruppel moet verwijderen. De schuifbalk en 1-2-3 geven aan dat de meter de resultaten berekent.

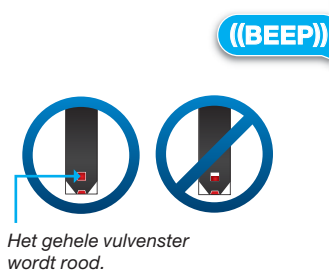

Het gehele vulvenster wordt rood.

6 Laatste stappen:


Uw test is klaar als het resultaat van de bloedglucosetest met de datum en tijd op het scherm verschijnt. Druk op de knop CHECK om de maaltijdmarkering te bevestigen en het knipperen te stoppen.

Verwijder de gebruikte teststrip. De meter wordt automatisch uitgeschakeld. Klik de dop van de prikpen af. Plaats de beschermdop terug op het lancet. Verwijder het gebruikte lancet. Gooi de gebruikte teststrip en het lancet op de juiste manier weg in de naaldcontainer.



De prikpen gereedmaken


1 Klik de dop van de prikpen af.

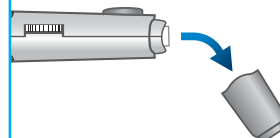


2 Plaats een nieuw lancet stevig in de lancethouder.



3 Draai de beschermdop van het lancet eraf.

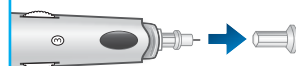

4 Plaats de dop weer op de prikpen.

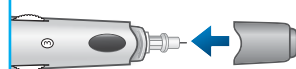

5 Stel het prikniveau in.



6 Trek de spangreep uit tot deze klikt.



Guide simplifié

Aucun codage requis

Taille de l'échantillon de sang – 0,5 µL

Durée du test – 6 sec.*

Mémoire – 1865 résultats

IMPORTANT : Consultez le guide d'utilisation BGStar® pour obtenir des instructions plus détaillées sur la manière d'effectuer le test.

Le système BGStar® vous permet de tester votre glycémie sur le bout d'un doigt, la paume de la main (à la base du pouce) ou l'avant-bras (consultez le guide d'utilisation pour connaître les emplacements spécifiques).

Généralités sur le système BGStar®



Lecteur de glycémie

- 1) Affichage
- 2) Bouton de SÉLECTION
- 3) Bouton RÉTROÉCLAIRAGE
- 4) Bouton fléché BAS
- 5) Bouton fléché HAUT
- 6) Fente d'insertion



Bandelette

- 1) Barres de contact
- 2) Fenêtre visuelle de remplissage
- 3) Zone d'échantillon



Stylo autopiqueur

- 1) Bouton d'armement
- 2) Mollette de réglage de profondeur
- 3) Fenêtre indicatrice de profondeur
- 4) Bouton déclencheur
- 5) Support de lancette
- 6) Embout du stylo autopiqueur
- 7) Embout pour les autres sites de test (paume de la main, avant-bras)
- 8) Lancette
- 9) Capuchon de la lancette

*Durée moyenne du test

Étapes pour effectuer un test de glycémie

(Pour les instructions complètes, consultez le guide d'utilisation BGStar®)

1 Insérez une nouvelle bandelette dans le lecteur

Insérez la bandelette dans la fente d'insertion avec les barres de contact orientées vers le haut. Le lecteur sera automatiquement activé.


ATTENTION : pour garantir des résultats précis, lavez-vous les mains au savon et à l'eau tiède et séchez-les avant chaque test.



2 Piquez le site de test

Suivez les instructions pour la préparation du stylo autopiqueur (voir les explications à droite).


Appuyez le stylo autopiqueur contre le site à piquer. Appuyez sur le bouton déclencheur.

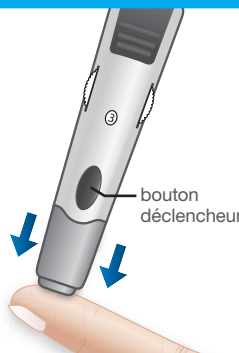

3 Obtenez la goutte de sang


Essuyez la première goutte de sang qui fait surface avec un mouchoir ou une serviette en papier.

Faites pression de la base du doigt en remontant vers l'extrémité, jusqu'à ce qu'une deuxième petite goutte de sang soit obtenue.

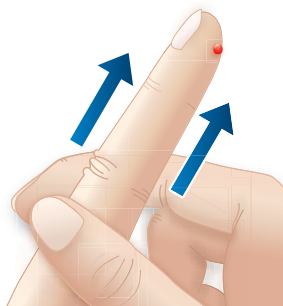

4 Mettez la bandelette en contact avec l'échantillon de sang


La bandelette absorbe le sang par la zone d'échantillon.

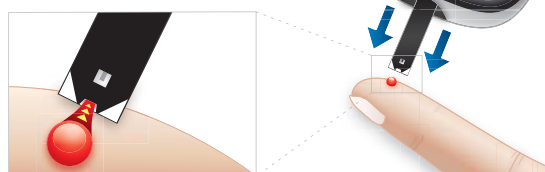

5 Retirez la bandelette de l'échantillon de sang quand vous entendez le bip

Votre lecteur émet un bip quand vous devez retirer la bandelette de l'échantillon de sang. La barre défilante et 1-2-3 indiquent que le lecteur est en train de calculer vos résultats.

((BEEP))

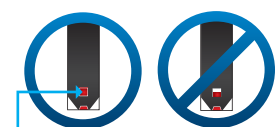

Toute la fenêtre visuelle de remplissage devient rouge.



6 Étapes finales


Votre test est terminé quand votre résultat de glycémie avec l'heure et la date sont indiqués sur l'affichage. Le fait d'appuyer sur le bouton de SÉLECTION confirme l'indicateur de repas, qui s'arrête alors de clignoter.

Retirez la bandelette usagée. Le lecteur est automatiquement désactivé. Détachez l'embout du stylo autopiqueur. Remettez le capuchon de la lancette. Retirez la lancette usagée. Jetez la bandelette et la lancette dans le container à aiguilles de façon adéquate.



Préparation du stylo autopiqueur


1 Détachez l'embout du stylo autopiqueur.

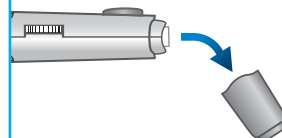


2 Insérez une nouvelle lancette à fond dans le support de lancette.



3 Détachez le capuchon de la lancette en tournant.

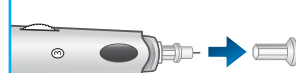

4 Remettez l'embout du stylo autopiqueur.

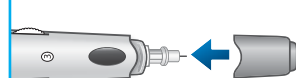

5 Réglez la profondeur de pénétration de la lancette.



6 Tirez le bouton d'armement vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

